

Cone Morse



EEE[®]

DENTAL COMPONENTES



Exports to Germany since 2011

Aperfeiçoando tecnologias



Aperfeiçoando tecnologias

O aperfeiçoamento constante nos aproxima da perfeição. Por isso, os componentes para prótese sobre implantes da EFF Dental são minuciosamente estudados antes de serem produzidos para trazer soluções de alta performance e assim, facilitar o seu dia a dia, com qualidade e inteligência.

Toda a linha de produtos foi planejada e desenvolvida por dentistas e técnicos em prótese a partir de situações vivenciadas na clínica e no laboratório, incorporando tecnologia nipo-germânica para oferecer o melhor. Os componentes são produzidos no Brasil, garantindo uma vantagem extra: excelente custo-benefício para seus trabalhos.

Obrigado por escolher a EFF Dental


Diretor técnico:
Flavio Rosa de Oliveira
CROSP-CD 90026




Controle de Qualidade

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer alto controle de qualidade para que você ofereça a seus pacientes segurança os tratamento. Realizamos estudos constantes nos componentes para garantir a mesma excelência dos produtos nacionais e importados.

Controle de Adaptação

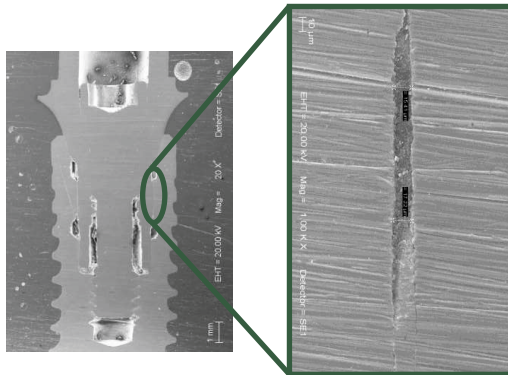

* Adaptação do pilar cimentável EFF Dental, realizada em MEV

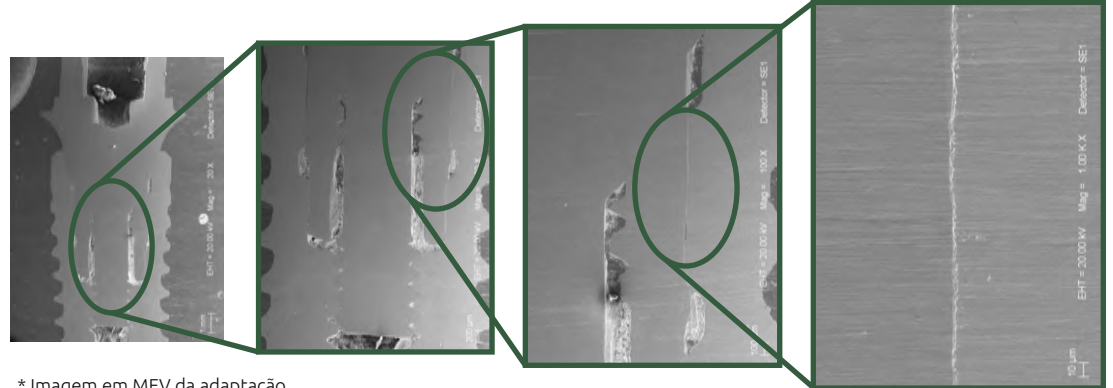

* Imagem em MEV da adaptação entre o pilar protético da EFF Dental e o implante.


Controle de Fadiga

Ensaio Estáticos

Os dados e gráficos abaixo demonstram os resultados obtidos dos ensaios estáticos e as curvas de força versus deslocamento.

Amostra	Carga Máxima (N)
MET140232 - 1	621,10
MET140232 - 2	601,05
MET140232 - 3	611,07
MET140232 - 4	567,89
MET140232 - 5	548,51
Média	589,92
Desvio Padrão	30,59


* Tabela - Os componentes da EFF Dental aguentaram uma carga média de 589,92N

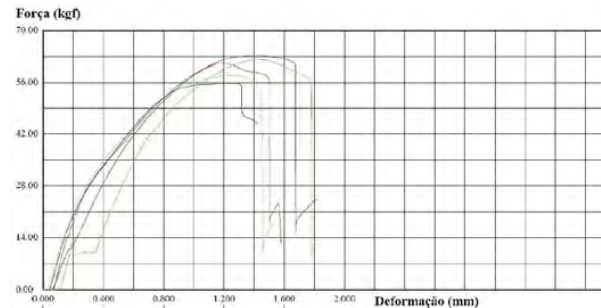


* Figura -Curva de ensaio estático

Ensaio Dinâmicos

A figura abaixo contém a curva de carga versus número de ciclos, onde se verifica que a resistência à fadiga corresponde a 30% (176,98N) da carga de referência (589,92N).

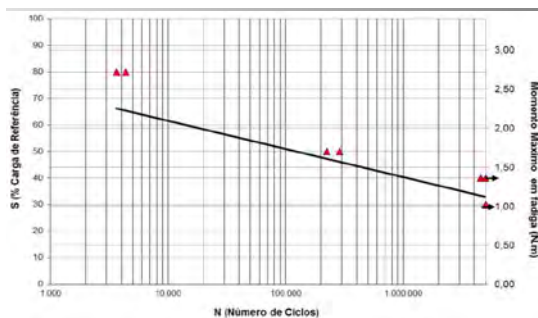



* Figura - Curva SxN do ensaio de fadiga
* Fonte CCDM - Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, 04/2014

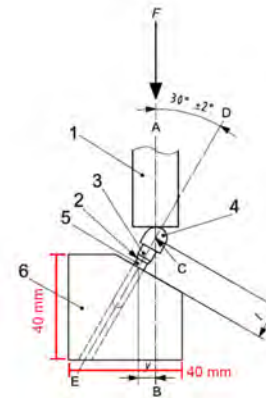

* Figura - Ilustração da montagem do ensaio - equipamento EMIC modelo DL1000, segundo instrução do IMP 320 e norma ISO14801: 2007

Controle em todos os processos

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer sempre o melhor para os seus clientes, e para isso se preocupa com a qualidade da produção desde o momento do armazenamento da matéria prima, até a embalagem final, garantindo a rastreabilidade para o cliente.

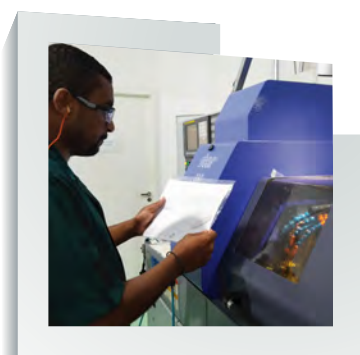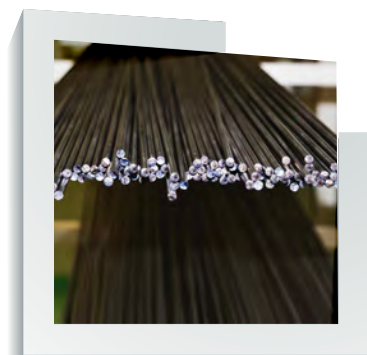

Entenda o que significa cada certificado

A EFF Dental possui certificações anualmente processadas pelos principais órgãos certificadores nacionais e internacionais e todo ano, auditores alemães visitam a EFF Dental para analisar os processos da fábrica.



Certificado de Boas Práticas Anvisa



ISO13485 Certificação Médica Internacional
ISO9001 Certificação Administrativa de Processos



Certificado da Comunidade Européia

S.M.P. (Sistema Multi Plataforma)

Para melhor compreender a sistemática e características dos seus produtos, a EFF Dental desenvolveu uma terminologia que simplificará a identificação dos produtos similares do mercado.

O Sistema Multi Plataforma (S.M.P.), é uma nomenclatura única para identificar componentes que utilizam vários sistemas de implantes do mercado que exercem a mesma função, facilitando assim a seleção do componente ideal para o tratamento.




Como identificar o seu componente

A EFF Dental produz componentes protéticos para a maioria dos sistemas e marcas de implantes do mercado internacional e nacional e pensando na facilidade da busca por itens necessários para o tratamento dos seus pacientes, oferecemos o manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma) onde você encontra a peça certa para cada tratamento.


Com a embalagem do implante em mãos, verifique a marca comercial¹, código do produto², diâmetro do implante e plataforma protética³. Com essas informações, você identifica no manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma), a S.M.P. EFF e a página onde estão localizados os componentes.

Exemplo (CM): Implante Nobel Biocare[®] de 3.0mm de diâmetro e 3.0mm de plataforma protética tem o código S.M.P. EFF K3.1 e está na página 10 do catálogo.

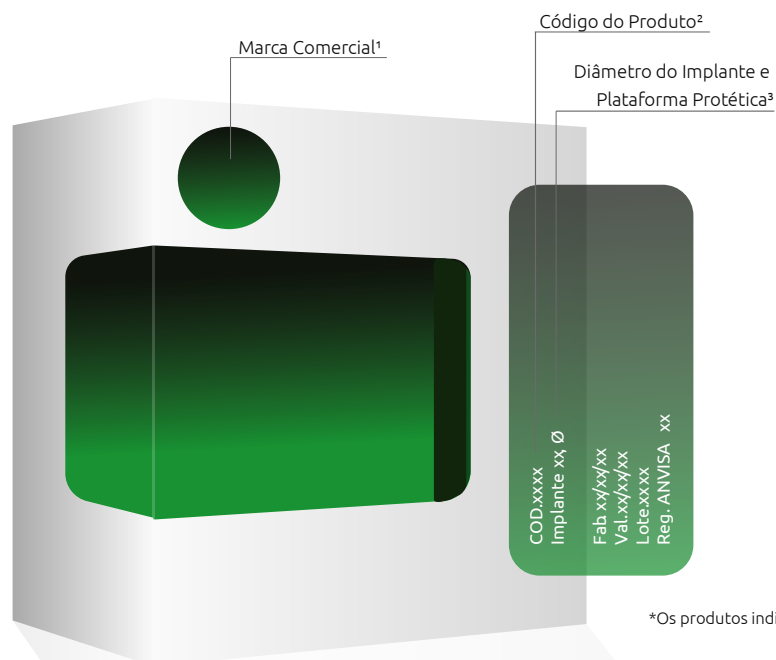

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

Aplicação	Especificação	Implante	Plataforma Protética	S.M.P. EFF	Página
Nobel Biocare®		3.0	3.0	K3.1	8
Nobel Biocare®	NP	3.5	3.5	K3.2	9
Nobel Biocare®	RP	4.3/5.0	3.9	K3.3	10
STR	RN	3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
STR	WN	4.8	6.5	J3.2	12
STR	Pilar Synocta®		4.1/4.8/6.5	SYRN/SYWN	13
STR	SC	2.9	2.9	J3.5	14
STR	NC	3.3	3.3	J3.3	15
STR	RC	4.1/4.8	4.1	J3.4	16
STR	X RB	3.5	3.5/3.75/4.0/4.5	J3.6	17
STR	X WB	4.5	3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5	J3.7	18
STR	Pilar SRA®		3.5/4.5/4.6	MB/SRA	19
NEO	C M	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1	20 e 21
NEO	EGM	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.0	A3.2	22 e 23
NEO	Pilar GM e Micro		3.5	PGM/MPGM	24
NEO	Pilar GT		4.8	MPGT	25
MIS®	C1 Narrow	3.3	3.3	T3.1	26
MIS®	V3 Narrow	3.3	3.3	T3.2	27
MIS®	C1/V3 Standard	3.75/3.9/4.2/4.3	3.75/3.9/4.2/4.3	T3.3	28
SIN®	Strong®	3.5/3.8/4.5/5.5	3.5/3.8/4.5/5.5	C3.1	29
SignoVinces®	Duocon	3.5/4.0	3.5	Q3.1	30
Ankylos®		3.5/4.5/5.5/7.0	3.5/4.5/5.5/7.0	K3.4	31
Conexão®		3.5/3.75/4.0/5.0	3.5/4.0	C3.2	9
Zimmer®	Swiss Plus	3.3/4.1/4.8	3.5	J3.1	11
Lifecor®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
Globtek®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
TitaniumFix®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
Biomet3i™		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
Derig®		3.3	3.3	J3.3	15
SIN®	Unitite®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	4.8	A3.1	20 e 21
Implacil®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5	A3.1	20 e 21
Intraoss®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1	20 e 21
Pross®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
Dentoflex®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
KOPP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
INP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
TitaniumFix	BlackFix	3.5/4.0	3.3/4.5	Q3.1	30
Mini Pilar	Plat. Regular / Esthetione		3.5/4.0	M.P. EONE	32
Mini Pilar	OnBase			PON	33
Chaves Digitais					34
Chaves para Torquímetro					35
Kits Protéticos All in One Full All in one Easy					36
Kits Protéticos Scan Intraoral					37
Informações da Etiqueta					38

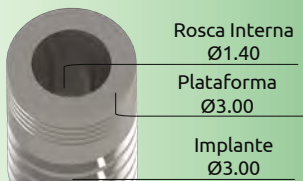

Componentes para Implantes Conical Connection® Ø3.0



K3.1

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 15



Cicatrizador
EFF 105 . 15A cinta 3.0mm
EFF 105 . 15B cinta 5.0mm
EFF 105 . 15C cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 15A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 15B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 15



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 15A
Rotacional
EFF 405 . 15B



Munhão Cimentável
EFF 505 . 15A cinta 1.5mm
EFF 505 . 15B cinta 3.0mm
EFF 505 . 15C cinta 4.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 15A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 15B . CJ



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm

Pilar para prótese parafusada



Torque 10Ncm

Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 15A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 15B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 15C . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 15D . CJ cinta 4.5mm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



Análogo Digital
EFF 305 . 15 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 15A . T
EFF 1505 . 15A . C



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



Link para CAD/CAM Small

EFF 6805 . 15A . 1 . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 15A . 2 . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 15A . 3 . S cinta 3.5mm



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 15A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 15A . P . CJ



Scan-Body Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2101 . 07C ★
Parafuso Unigrip para Zirconia
Torque 10Ncm

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5 - NP

Rosca Interna


Ø1.60

Plataforma

Ø3.50

Implante

Ø3.50

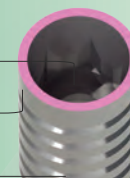

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 06



Cicatrizador Perfil Reto Ø3.50mm
EFF 105 . 06A cinta 3.0mm
EFF 105 . 06B cinta 5.0mm
EFF 105 . 06C cinta 7.0mm
Perfil Divergente Ø5.0mm
EFF 105 . 06 . 6A cinta 3.0mm
EFF 105 . 06 . 6B cinta 5.0mm
EFF 105 . 06 . 6C cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta
Anti Rotacional
EFF 205 . 06A . CJ
Rotacional
EFF 205 . 06A . 1 . CJ



Transfer Moldeira Fechada
Anti Rotacional
EFF 205 . 06B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 06



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 06A
Rotacional
EFF 405 . 06B



Munhão Cimentável
EFF 505 . 06 . 1A cinta 1.5mm
EFF 505 . 06 . 1B cinta 2.5mm
EFF 505 . 06 . 1C cinta 3.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 06A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 06B . CJ



EFF 2102 . 02C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 06A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 06B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 06C . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 06D . CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado 17°
EFF 1105 . 06 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 06 . 1B . CJ cinta 3.5mm

Torque 20Ncm

30°
EFF 1105 . 06 . 2A . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 06 . 2B . CJ cinta 4.5mm



Pilar Bola
EFF 1705 . 06A cinta 1.5mm
EFF 1705 . 06B cinta 2.5mm
EFF 1705 . 06C cinta 3.5mm

Torque 20Ncm



OnBase
EFF 605 . 06A . CJ cinta 1.75mm
EFF 605 . 06B . CJ cinta 2.5mm
EFF 605 . 06C . CJ cinta 3.5mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne
EFF 905 . 06A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 06B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 06C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar e OnBase consultar página 32 e 33.



Análogo Digital
EFF 305 . 06 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 06A . T
EFF 1505 . 06A . C



Link para CAD/CAM
Large/Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm
Small/Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 1 . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2 . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3 . S cinta 3.5mm

Large/Rotacional
EFF 6805 . 06B . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 06B . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06B . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06B . 3 cinta 3.5mm
Small/Rotacional
EFF 6805 . 06B . 1 . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06B . 2 . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06B . 3 . S cinta 3.5mm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



EFF 2102 . 02C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 06A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 02C
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 08C
Parafuso Unigrip para Zircônia
Torque 20Ncm



Rosca Interna
Ø2.00
Plataforma
Ø3.90
Implante
Ø4.30/5.00

Componentes para Implantes Conical Connection® Ø3.9 - RP

S
M
P
K3.3

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 07



Cicatrizador
Perfil Reto Ø4.3mm
EFF 105 . 07A cinta 3.0mm
EFF 105 . 07B cinta 5.0mm
EFF 105 . 07C cinta 7.0mm
Perfil Divergente Ø5.0mm
EFF 105 . 07 . 6A cinta 3.0mm
EFF 105 . 07 . 6B cinta 5.0mm
EFF 105 . 07 . 6C cinta 7.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
Anti Rotacional
EFF 205 . 07A . CJ
Rotacional
EFF 205 . 07A . 1 . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
Anti Rotacional
EFF 205 . 07B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 07



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 07A
Rotacional
EFF 405 . 07B



Munhão Cimentável
EFF 505 . 07 . 1A . cinta 1.5mm
EFF 505 . 07 . 1B . cinta 3.0mm
EFF 505 . 07 . 1C . cinta 4.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 07A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 07B . CJ



EFF 2104 . 15C
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15C
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15C
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F
Parafuso 360°
Torque 32Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 07A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 07B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 07C . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 07D . CJ cinta 4.5mm

Torque
32Ncm



Mini Pilar Angulado
17°
EFF 1105 . 07 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 07 . 1B . CJ cinta 3.5mm
30°
EFF 1105 . 07 . 2A . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 07 . 2B . CJ cinta 4.5mm

Torque
32Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 07A cinta 1.5mm
EFF 1705 . 07B cinta 2.5mm
EFF 1705 . 07C cinta 3.5mm

Torque
32Ncm



OnBase
EFF 605 . 07A . CJ cinta 1.75mm
EFF 605 . 07B . CJ cinta 2.5mm
EFF 605 . 07C . CJ cinta 3.5mm

Torque
32Ncm



EsthetiOne
EFF 905 . 07A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 07B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 07C . CJ cinta 3.0mm

Torque
32Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar e OnBase consultar página 32 e 33.



Análogo Digital
EFF 305 . 07 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 07A . T
EFF 1505 . 07A . C



Link para CAD/CAM
Large/Anti Rotacional
EFF 6805 . 07A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 07A . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 07A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 07A . 3 cinta 3.5mm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



EFF 2104 . 15C
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F
Parafuso 360°
Torque 32Ncm

Large/Rotacional
EFF 6805 . 07B . 4 cinta 0.5mm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 07A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 07A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2104 . 15C
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F
Parafuso 360°
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 13C
Parafuso Unigrip para Zirconia
Torque 32Ncm



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 01



Cicatrizador
EFF 105 . 01A cinta 1.5mm
EFF 105 . 01B cinta 2.0mm
EFF 105 . 01C cinta 3.0mm
EFF 105 . 01D cinta 4.0mm
EFF 105 . 01E cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 01A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 01B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 01



**Análogo do
Munhão Sólido**
EFF 305 . 01A h. 4.0mm
EFF 305 . 01B h. 5.5mm
EFF 305 . 01C h. 7.0mm



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 01A
Rotacional
EFF 405 . 01B



**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 805 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 01B . CJ



Pilar Cimentado
EFF 505 . 01 . 1 . CJ
h. 5.50mm



Munhão Sólido
EFF 505 . 01A h. 4.0mm
EFF 505 . 01B h. 5.5mm
EFF 505 . 01C h. 7.00mm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



**Ucla Plástica
do Pilar Cimentado**
EFF 705 . 01 . 2A
h. 5.5mm

Pilar para prótese parafusada



Pilar SynO
EFF 1105 . 01 . CJ

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Reto
(Switching)**
EFF 1105 . 07A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 07B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 07C . CJ cinta 3.5mm

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado
17°**
EFF 1105 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1105 . 01 . 1B . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm

30°
EFF 1105 . 01 . 2A . CJ cinta 3.0mm



Pilar Bola
EFF 1705 . 01
cinta 2.0mm

Torque 32Ncm



EsthetiOne
EFF 905 . 01A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 01B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 01C . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar SynO consultar página 13.



Análogo Digital
EFF 305 . 01 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 01A . T
EFF 1505 . 01A . C



Link para CAD/CAM
Ti Base Large
EFF 6805 . 01A . 1



Link para CAD/CAM
Perfect Base
EFF 6805 . 01A . P



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 19D ⚙
Parafuso Perfect Base
Torque 32Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



**Coping Plástico
p/Link Perfect Base**
EFF 725 . 01



Rosca Interna
Ø2.00
Plataforma
Ø6.50
Implante
Ø4.80

Componentes para Implantes Cone Morse Ø6.5 - WN

SMP
Sistema Multi Plataform
J3.2

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 02



Cicatrizador
EFF 105 . 02A cinta 1.5mm
EFF 105 . 02B cinta 2.0mm
EFF 105 . 02C cinta 3.0mm
EFF 105 . 02D cinta 4.0mm
EFF 105 . 02E cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 02A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 02B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 02




**Análogo do
Munhão Sólido**
EFF 305 . 02A h. 4.0mm
EFF 305 . 02B h. 5.5mm



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 02A
Rotacional
EFF 405 . 02B



**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 805 . 02A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 02B . CJ

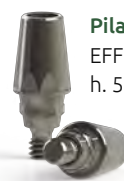

Pilar Cimentado
EFF 505 . 02 . 1 . CJ
h. 5.5mm



Munhão Sólido
EFF 505 . 02A h. 4.00mm
EFF 505 . 02B h. 5.50mm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx
Torque 32Ncm



**Ucla Plástica
do Pilar Cimentado**
EFF 705 . 01 . 2B
h. 5.5mm

Pilar para prótese parafusada



Pilar SynO
EFF 1105 . 02 . CJ

Torque 32Ncm



EsthetiOne
EFF 905 . 02A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 02B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 02C . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar SynO consultar página 13.



Análogo Digital
EFF 305 . 02 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 02A . T
EFF 1505 . 02A . C



Link para CAD/CAM
Ti Base Large
EFF 6805 . 02A . 1



Link para CAD/CAM
Perfect Base
EFF 6805 . 02A . P



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 19D ⚙
Parafuso Perfect Base
Torque 32Ncm



**Scan Intraoral
(Switching)**
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



**Coping Plástico
p/Link Perfect Base**
EFF 725 . 02



Sistema Multi Plataform

SYRN

Componentes para Prótese Parafusada Pilar SynO RN



Capa de Proteção
EFF 113 . 01 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 213 . 01A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 213 . 01B . CJ



Análogo
EFF 313 . 01



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 413 . 01A
Rotacional
EFF 413 . 01B



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



Coping Plástico
Anti Rotacional
EFF 713 . 01A
Rotacional
EFF 713 . 01B



Coping Plástico Base CrCo
Anti Rotacional
EFF 813 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 813 . 01B . CJ



Análogo Digital
EFF 313 . 01 . D



Scan Intraoral
EFF 9213 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF 6813 . 01A
Rotacional
EFF 6813 . 01B



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



Sistema Multi Plataform

SYWN

Componentes para Prótese Parafusada Pilar SynO WN



Capa de Proteção
EFF 113 . 02 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 213 . 02A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 213 . 02B . CJ



Análogo
EFF 313 . 02



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 413 . 02A
Rotacional
EFF 413 . 02B



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



Coping Plástico
Anti Rotacional
EFF 713 . 02A
Rotacional
EFF 713 . 02B



Coping Plástico Base CrCo
Anti Rotacional
EFF 813 . 02A . CJ
Rotacional
EFF 813 . 02B . CJ



Análogo Digital
EFF 313 . 02 . D



Scan Intraoral
EFF 9213 . 02A . P . CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF 6813 . 02A
Rotacional
EFF 6813 . 02B



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx

Torque 32Ncm

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø1.40

Plataforma
Ø2.90

Implante
Ø2.90

Componentes para Implantes Cone Morse Ø2.90 - SC



J3.5

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 28



Cicatrizador
EFF 105 . 28A . CJ cinta 2.0mm
EFF 105 . 28B . CJ cinta 3.5mm
EFF 105 . 28C . CJ cinta 5.0mm
EFF 105 . 28D . CJ cinta 6.5mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 28A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 28B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 28



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 28A . 1 cinta 1.0mm
EFF 405 . 28A . 2 cinta 2.0mm
EFF 405 . 28A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 28A . 1 . CJ cinta 1.0mm
EFF 805 . 28A . 2 . CJ cinta 2.0mm
EFF 805 . 28A . 3 . CJ cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 28A . CJ cinta 1.0mm

Torque 10Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



Análogo Digital
EFF 305 . 28 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 28A . T
EFF 1505 . 28A . C

EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



Link para CAD/CAM
Ti Base
Small
EFF 6805 . 28A . 1S cinta 1.0mm
EFF 6805 . 28A . 2S cinta 2.0mm
EFF 6805 . 28A . 3S cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 28A



EFF 2101 . 15D
Parafuso Torx para Zirconia


Torque 10Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 28A . P . CJ



Scan-Body
Small
EFF 9700 . 1A

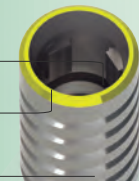

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 03



Cicatrizador
Perfil Reto Ø3.30
EFF 105 . 03A cinta 2.0mm
EFF 105 . 03B cinta 4.0mm
EFF 105 . 03C cinta 6.0mm
Perfil Divergente Ø4.80
EFF 105 . 03 . 1A cinta 2.0mm
EFF 105 . 03 . 1B cinta 3.5mm
EFF 105 . 03 . 1C cinta 5.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 03A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 03B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 03



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 03A
Rotacional
EFF 405 . 03B



Munhão Cimentável
Ø3.50mm - Pilar h. 4.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Ø3.50mm - Pilar h. 5.5mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2C . CJ cinta 3.0mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 03A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 03B . CJ



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm

Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Pilar M Base
Perfil Ø3.50
EFF 1105 . 03 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 1B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 1C . CJ cinta 4.5mm
Perfil Ø4.60
EFF 1105 . 03 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 2B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 2C . CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm



Pilar SRA®
Perfil Ø3.50
EFF 1105 . 03 . 3A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 3B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 3C . CJ cinta 4.0mm
Perfil Ø4.60
EFF 1105 . 03 . 4A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 4B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 4C . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Pilar Angulado SRA®
Perfil Ø4.60
EFF 1105 . 03 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm
EFF 1105 . 03 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm
EFF 1105 . 03 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm
EFF 1105 . 03 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 03A cinta 2.0mm
EFF 1705 . 03B cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne
EFF 905 . 03A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 03B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 03C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 03 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 03A . T
EFF 1505 . 03A . C



Link para CAD/CAM
Ti Base Large
EFF 6805 . 03A . 1 cinta 0.7mm
EFF 6805 . 03A . 4 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 03A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 03A . 3 cinta 3.5mm
Small
EFF 6805 . 03A . 1S cinta 0.7mm
EFF 6805 . 03A . 4S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 03A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 03A . 3S cinta 3.5mm




Link para CAD/CAM
Perfect Base
EFF 6805 . 03A . P



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 03A



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm

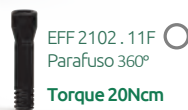

EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 05D
Parafuso Torx para Zircônia
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 03A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



Coping Plástico
p/Link Perfect Base
EFF 725 . 03

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø1.60
Plataforma
Ø4.10
Implante
Ø4.10/4.80

Componentes para Implantes Cone Morse Ø4.1 - RC

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 04



**Cicatrizador
Perfil Reto Ø4.80**
EFF 105 . 04A cinta 2.0mm
EFF 105 . 04B cinta 4.0mm
EFF 105 . 04C cinta 6.0mm
Perfil Divergente Ø6.00
EFF 105 . 04 . 1A cinta 2.0mm
EFF 105 . 04 . 1B cinta 4.0mm
EFF 105 . 04 . 1C cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 04A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 04B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 04



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 04A
Rotacional
EFF 405 . 04B



Munhão Cimentável
Ø5.00mm - Pilar h. 4.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Ø5.00mm - Pilar h. 5.5mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2C . CJ cinta 3.0mm

Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 04A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 04B . CJ



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Pilar M Base
Ø4.50
EFF 1105 . 04 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 04 . 1B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 1C . CJ cinta 4.5mm

Torque
20Ncm



Pilar SRA®
EFF 1105 . 04 . 3A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 04 . 3B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 3C . CJ cinta 4.0mm

Torque
20Ncm



Pilar Angulado SRA®
Ø4.60
Lado A
17° EFF 1105 . 04 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm
30° EFF 1105 . 04 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm
Lado B
17° EFF 1105 . 04 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm
30° EFF 1105 . 04 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm

Torque
20Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 04A cinta 2.0mm
EFF 1705 . 04B cinta 4.0mm

Torque
20Ncm



EsthetiOne
EFF 905 . 04A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 04B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 04C . CJ cinta 3.0mm

Torque
20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar SRA®/MBase consultar página 19.



Análogo Digital
EFF 305 . 04 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 04A . T
EFF 1505 . 04A . C



Link para CAD/CAM
Ti Base
Large
EFF 6805 . 04A . 1 cinta 0.7mm
EFF 6805 . 04A . 4 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 04A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 04A . 3 cinta 3.5mm
Small
EFF 6805 . 04A . 1S cinta 0.7mm
EFF 6805 . 04A . 4S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 04A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 04A . 3S cinta 3.5mm

EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm

EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Perfect Base
EFF 6805 . 04A . P

EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm

EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 04A



EFF 2102 . 05D
Parafuso Torx para Zirconia
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 04A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm


EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



Coping Plástico
p/Link Perfect Base
EFF 725 . 04



Componentes para prótese parafusada e cimentada

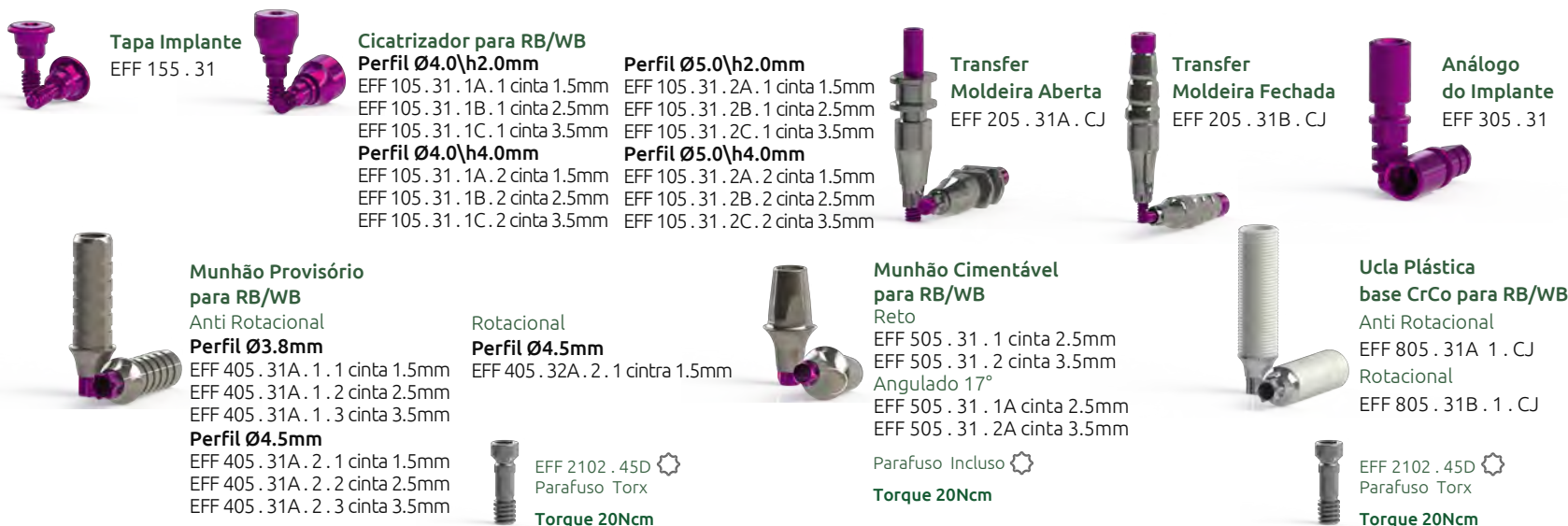

Tapa Implante
EFF 155 . 31

Cicatrizador para RB/WB
Perfil Ø4.0\h2.0mm

EFF 105 . 31 . 1A . 1 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 1B . 1 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 1C . 1 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.0\h4.0mm

EFF 105 . 31 . 1A . 2 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 1B . 2 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 1C . 2 cinta 3.5mm

Perfil Ø5.0\h2.0mm

EFF 105 . 31 . 2A . 1 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 2B . 1 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 2C . 1 cinta 3.5mm

Perfil Ø5.0\h4.0mm

EFF 105 . 31 . 2A . 2 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 2B . 2 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 2C . 2 cinta 3.5mm

Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 31A . CJ

Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 31B . CJ

Análogo do Implante
EFF 305 . 31

Munhão Provisório para RB/WB

Anti Rotacional

Perfil Ø3.8mm

EFF 405 . 31A . 1 . 1 cinta 1.5mm
EFF 405 . 31A . 1 . 2 cinta 2.5mm
EFF 405 . 31A . 1 . 3 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.5mm

EFF 405 . 31A . 2 . 1 cinta 1.5mm
EFF 405 . 31A . 2 . 2 cinta 2.5mm
EFF 405 . 31A . 2 . 3 cinta 3.5mm

Rotacional

Perfil Ø4.5mm

EFF 405 . 32A . 2 . 1 cinta 1.5mm

Munhão Cimentável para RB/WB

Reito

EFF 505 . 31 . 1 cinta 2.5mm
EFF 505 . 31 . 2 cinta 3.5mm

Angulado 17°

EFF 505 . 31 . 1A cinta 2.5mm
EFF 505 . 31 . 2A cinta 3.5mm

Parafuso Incluso

Torque 20Ncm

Ucla Plástica base CrCo para RB/WB

Anti Rotacional

EFF 805 . 31A . 1 . CJ

Rotacional

EFF 805 . 31B . 1 . CJ

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada

Pilar para prótese parafusada unitária



Pilar Reto SRA® para RB/WB

EFF 1105 . 31A . CJ . cinta 1.5mm
EFF 1105 . 31B . CJ . cinta 2.5mm
EFF 1105 . 31C . CJ . cinta 3.5mm
EFF 1105 . 31D . CJ . cinta 4.5mm

Torque 20Ncm




Pilar Angulado SRA® para RB/WB
Perfil Ø4.6mm

EFF 1105 . 31 . 1A . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 31 . 1B . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 31 . 1C . CJ cinta 5.5mm

17°
EFF 1105 . 31 . 2A . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 31 . 2B . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 31 . 2C . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm

30°

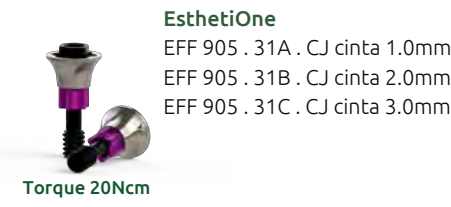

EsthetiOne

EFF 905 . 31A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 31B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 31C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar SRA®/MBase consultar página 19.



Análogo Digital
EFF 305 . 31 . D

Abut. Rollings*
EFF 1505 . 31 . T
EFF 1505 . 31 . C

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

Link para CAD/CAM para RB/WB

Ti Base Large

Perfil Ø4.4\h4.7mm

EFF 6805 . 31 . 3A . 1 cinta 0.75mm
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 31 . 3C . 1 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 31 . 3D . 1 cinta 3.5mm

Small

Perfil Ø3.8\h4.7mm

EFF 6805 . 31 . 3A . 1 . S cinta 0.75mm
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 . S cinta 1.5mm

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

Link para CAD/CAM para RB/WB

Perfect Base

Perfil Ø3.8\h5.5mm

EFF 6805 . 31 . 1A . 3 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 31 . 1B . 3 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 31 . 1C . 3 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.5\h5.5mm

EFF 6805 . 31 . 2A . 3 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 31 . 2B . 3 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 31 . 2C . 3 cinta 3.5mm

Coping Plástico p/Link Perfect Base RB/WB

EFF 725 . 05

Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 01A

Interface para Zircônia
EFF 6905 . 31A

EFF 2102 . 47D

Parafuso Torx para Zircônia

Torque 20Ncm

Scan Intraoral para RB/WB

EFF 9205 . 31A . P . CJ

Scan-Body Large

EFF 9700 . A

Small

EFF 9700 . 1A

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø1.60
Plataforma
Ø3.50/3.75/4.00
4.50/5.00/5.50/6.50
Implante
Ø4.50

Componentes para Implantes

Cone Morse Ø3.5/3.75/4.0/4.5 5.0/5.5/6.5 - X WB



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 32



Cicatrizador
Perfil Ø6.0\h2.0mm
EFF 105 . 33 . 1A . 1 cinta 0.75mm
EFF 105 . 33 . 1B . 1 cinta 1.5mm
Perfil Ø6.0\h4.0mm
EFF 105 . 33 . 1A . 2 cinta 0.75mm
EFF 105 . 33 . 1B . 2 cinta 1.5mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 32A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 32B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 32



Munhão Provisório
Anti Rotacional
Perfil Ø5.50mm
EFF 405 . 33A . 1 . 4 cinta 0.75mm
EFF 405 . 33A . 1 . 1 cinta 1.5mm



Ucla Plástica
base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 32A . 2 . CJ
Rotacional
EFF 805 . 32B . 2 . CJ



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Torque 20Ncm

Pilar Reto SRA®
(Switching)
EFF 1105 . 31A . CJ . cinta 1.5mm
EFF 1105 . 31B . CJ . cinta 2.5mm
EFF 1105 . 31C . CJ . cinta 3.5mm
EFF 1105 . 31D . CJ . cinta 4.5mm



Torque 20Ncm

Pilar Angulado SRA® (Switching)
Perfil Ø4.6mm
EFF 1105 . 31 . 1A . CJ cinta 3.5mm
17° EFF 1105 . 31 . 1B . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 31 . 1C . CJ cinta 5.5mm
EFF 1105 . 31 . 2A . CJ cinta 3.5mm
30° EFF 1105 . 31 . 2B . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 31 . 2C . CJ cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

EsthetiOne
EFF 905 . 33A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 33B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 33C . CJ cinta 3.0mm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar SRA®/MBase consultar página 19.



Análogo Digital
EFF 305 . 32 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 32 . T
EFF 1505 . 32 . C



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Ti Base
Large
Perfil Ø5.5mm/h4.7

EFF 6805 . 33 . 2A . 1 cinta 0.75mm
EFF 6805 . 33 . 2B . 1 cinta 1.5mm



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Perfect Base
Large
Perfil Ø5.5mm/h5.5mm

EFF 6805 . 33 . 1A . 3 cinta 0.75mm
EFF 6805 . 33 . 1B . 3 cinta 1.5mm



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



Munhão
de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface
para Zirconia
EFF 6905 . 32A



Scan Intraoral
(Switching)
EFF 9205 . 31A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



Coping Plástico
p/Link Perfect Base
EFF 725 . 06



EFF 2102 . 47D
Parafuso Torx
para Zirconia
Torque 20Ncm



Sistema Multi Plataform

MB


Componentes para Prótese Parafusada Pilar M Base



Capa de Proteção
EFF 114 . 01 . CJ Ø3.5
EFF 114 . 02 . CJ Ø4.5



Transfer Moldeira Aberta
EFF 214 . 01 . 1A . CJ Ø3.5
EFF 214 . 01 . 2A . CJ Ø4.5

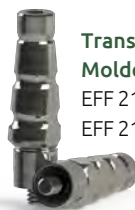

Transfer Moldeira Fechada
EFF 214 . 01 . 1B . CJ Ø3.5
EFF 214 . 01 . 2B . CJ Ø4.5



Análogo
EFF 314 . 01A Ø3.5
EFF 314 . 01B Ø4.5



Coping Provisório
EFF 414 . 01 . 1 Ø3.5
EFF 414 . 01 . 2 Ø4.5



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm



Coping Plástico
EFF 714 . 01 . 1 Ø3.5
EFF 714 . 01 . 2 Ø4.5



Coping Plástico Base CrCo
EFF 814 . 01 . 1 . CJ Ø3.5
EFF 814 . 01 . 2 . CJ Ø4.5



Análogo Digital
EFF 314 . 01A . D Ø3.5
EFF 314 . 01B . D Ø4.5



Scan Intraoral
EFF 9214 . 01A . P . CJ Ø3.5
EFF 9214 . 02A . P . CJ Ø4.5



Link para CAD/CAM
EFF 6814 . 01 . 1B Ø3.5
EFF 6814 . 01 . 2B Ø4.5



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm



Sistema Multi Plataform

SRA


Componentes para Prótese Parafusada Pilar SRA®



Capa de Proteção
EFF 114 . 03 . CJ Ø3.5
EFF 114 . 04 . CJ Ø4.6



Transfer Moldeira Aberta
EFF 214 . 03A . CJ Ø3.5
EFF 214 . 04A . CJ Ø4.6

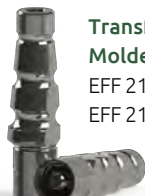

Transfer Moldeira Fechada
EFF 214 . 03B . CJ Ø3.5
EFF 214 . 04B . CJ Ø4.6



Análogo
EFF 314 . 03 Ø3.5
EFF 314 . 04 Ø4.6



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 414 . 03A Ø3.5
EFF 414 . 04A Ø4.6
Rotacional
EFF 414 . 03B Ø3.5
EFF 414 . 04B Ø4.6



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm



Coping Plástico
Anti Rotacional
EFF 714 . 03A Ø3.5
EFF 714 . 04A Ø4.6
Rotacional
EFF 714 . 03B Ø3.5
EFF 714 . 04B Ø4.6



Coping Plástico Base CrCo
Anti Rotacional
EFF 814 . 03A . CJ Ø3.5
EFF 814 . 04A . CJ Ø4.6
Rotacional
EFF 814 . 03B . CJ Ø3.5
EFF 814 . 04B . CJ Ø4.6



Análogo Digital
EFF 314 . 03 . D Ø3.5
EFF 314 . 04 . D Ø4.6



Scan Intraoral
EFF 9214 . 03A . P . CJ Ø3.5
EFF 9214 . 04A . P . CJ Ø4.6



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF 6814 . 03A Ø3.5
EFF 6814 . 04A Ø4.6
Rotacional
EFF 6814 . 03B Ø3.5
EFF 6814 . 04B Ø4.6



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm




EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx
Torque 10Ncm

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

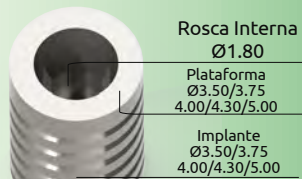

Componentes para Implantes

Cone Morse Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3 /Ø5.0 - CM



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 05



Cicatrizador
Perfil Ø 3.30
EFF 105 . 05 . 1A cinta 0.8mm
EFF 105 . 05 . 1B cinta 1.5mm
EFF 105 . 05 . 1C cinta 2.5mm
EFF 105 . 05 . 1D cinta 3.5mm
EFF 105 . 05 . 1E cinta 4.5mm
EFF 105 . 05 . 1F cinta 5.5mm
Perfil Ø 4.50
EFF 105 . 05 . 2A cinta 0.8mm
EFF 105 . 05 . 2B cinta 1.5mm
EFF 105 . 05 . 2C cinta 2.5mm
EFF 105 . 05 . 2D cinta 3.5mm
EFF 105 . 05 . 2E cinta 4.5mm
EFF 105 . 05 . 2F cinta 5.5mm



Transfer
Moldeira Aberta
Anti Rotacional
EFF 205 . 05A . 1 . CJ
Rotacional
EFF 205 . 05A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
Anti Rotacional
EFF 205 . 05B . 1 . CJ
Rotacional
EFF 205 . 05B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 05



Kit do Munhão Sólido
Transfer e Coping Plástico
Perfil Ø 3.30
EFF 00500 . 1A h 4.0mm
EFF 00500 . 1B h 6.0mm
Perfil Ø 4.50
EFF 00500 . 2A h 4.0mm
EFF 00500 . 2B h 6.0mm



Análogo do Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30
EFF 305 . 05 . 1A h 4mm
EFF 305 . 05 . 1B h 6mm
Perfil Ø 4.50
EFF 305 . 05 . 2A h 4mm
EFF 305 . 05 . 2B h 6mm



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 05 A . 1 h 0.8mm
EFF 405 . 05 A . 2 h 1.5mm
EFF 405 . 05 A . 3 h 2.5mm
EFF 405 . 05 A . 4 h 3.5mm
Rotacional
EFF 405 . 05 B . 1 h 0.8mm
EFF 405 . 05 B . 2 h 1.5mm
EFF 405 . 05 B . 3 h 2.5mm
EFF 405 . 05 B . 4 h 3.5mm



Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30|h 4.0mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1D cinta 3.5mm
Perfil Ø 3.30|h 6.0mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2D cinta 3.5mm
Perfil Ø4.50|h 4.0mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1D cinta 3.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1E cinta 4.5mm
Perfil Ø4.50|h 6.0mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2D cinta 3.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2E cinta 4.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 05 . 1A . CJ h 0.8mm
EFF 805 . 05 . 2A . CJ h 1.5mm
EFF 805 . 05 . 3A . CJ h 2.5mm
Rotacional
EFF 805 . 05 . 1B . CJ h 0.8mm
EFF 805 . 05 . 2B . CJ h 1.5mm
EFF 805 . 05 . 3B . CJ h 2.5mm



Para h.0.80/1.50/2.50mm ⬡
EFF 2103 . 22A
Para h. 3.50/4.50mm
EFF 2103 . 22A . 1
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Para h.0.80/1.50/2.50mm ⬡
EFF 2103 . 22A
Para h. 3.50/4.50mm
EFF 2103 . 22A . 1
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Parafuso Incluso
Torque 20Ncm

Continuação Cone Morse - CM

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 05A . CJ cinta 0.8mm
EFF 1105 . 05B . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05C . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05D . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 05E . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 05F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



Micro Pilar Reto

EFF 1105 . 05 . 4A . CJ cinta 0.8mm
EFF 1105 . 05 . 4B . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 4C . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05 . 4D . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 05 . 4E . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 05 . 4F . CJ cinta 5.5mm
EFF 1105 . 05 . 4G . CJ cinta 6.5mm
EFF 1105 . 05 . 4H . CJ cinta 7.5mm
EFF 1105 . 05 . 4I . CJ cinta 8.5mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° Sem exact

EFF 1105 . 05 . 1A . 1 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 1B . 1 . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05 . 1C . 1 . CJ cinta 3.5mm

30° Sem exact

EFF 1105 . 05 . 2A . 1 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 2B . 1 . CJ cinta 2.5mm

Torque 20Ncm

Com exact

EFF 1105 . 05 . 1A . 2 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 1B . 2 . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05 . 1C . 2 . CJ cinta 3.5mm

Com exact

EFF 1105 . 05 . 2A . 2 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 2B . 2 . CJ cinta 2.5mm



EsthetiOne

EFF 905 . 05A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 05B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 05C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar PGM/MPGM/MPGT consultar página 24 e 25.



Análogo Digital

EFF 305 . 05 . D



Abut. Rollings*

EFF 1505 . 05A . T
EFF 1505 . 05A . C



Link para CAD/CAM

Large

EFF 6805 . 05 . 5A cinta 1.0mm
EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm

Small

EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 1.0mm
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

Large

Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF 2103 . 22A
Para h. 3.5/4.5mm
EFF 2103 . 22A . 1
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Small

Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF 2103 . 22A . 2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF 2103 . 22A . 3
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zirconia

EFF 6905 . 05A - h 1.5mm



EFF 2103 . 09A
Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 20Ncm



Análogo Digital do Munhão Sólido

Perfil Ø 3.30

EFF 305 . 05 . 1A . D h 4mm
EFF 305 . 05 . 1B . D h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 305 . 05 . 2A . D h 4mm
EFF 305 . 05 . 2B . D h 6mm



Scan Intraoral para Munhão Sólido

Perfil Ø 3.30

EFF 9205 . 05 . 1A . P . CJ h 4mm
EFF 9205 . 05 . 1B . P . CJ h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 9205 . 05 . 2A . P . CJ h 4mm
EFF 9205 . 05 . 2B . P . CJ h 6mm



Scan Intraoral

EFF 9205 . 05A . P . CJ



Scan-Body


Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com © são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

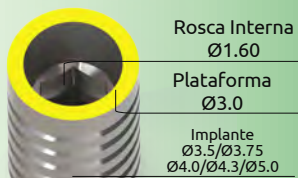

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.0 - EGM



A3.2

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 29



Cicatrizador
Perfil Ø 3.30
EFF 105 . 29 . 1A cinta 0.8mm
EFF 105 . 29 . 1B cinta 1.5mm
EFF 105 . 29 . 1C cinta 2.5mm
EFF 105 . 29 . 1D cinta 3.5mm
EFF 105 . 29 . 1E cinta 4.5mm
EFF 105 . 29 . 1F cinta 5.5mm
Perfil Ø 4.50
EFF 105 . 29 . 2A cinta 0.8mm
EFF 105 . 29 . 2B cinta 1.5mm
EFF 105 . 29 . 2C cinta 2.5mm
EFF 105 . 29 . 2D cinta 3.5mm
EFF 105 . 29 . 2E cinta 4.5mm
EFF 105 . 29 . 2F cinta 5.5mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 29A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 29B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 29



Kit do Munhão Sólido
Transfer e Coping Plástico
Perfil Ø 3.30
EFF 00500 . 1A - h 4.0mm
EFF 00500 . 1B - h 6.0mm
Perfil Ø 4.50
EFF 00500 . 2A - h 4.0mm
EFF 00500 . 2B - h 6.0mm



Análogo do Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30
EFF 305 . 05 . 1A h 4mm
EFF 305 . 05 . 1B h 6mm
Perfil Ø 4.50
EFF 305 . 05 . 2A h 4mm
EFF 305 . 05 . 2B h 6mm



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 29A . 1 . CJ h 0.8mm
EFF 405 . 29A . 2 . CJ h 1.5mm
EFF 405 . 29A . 3 . CJ h 2.5mm
EFF 405 . 29A . 4 . CJ h 3.5mm
EFF 405 . 29A . 5 . CJ h 4.5mm
EFF 405 . 29A . 6 . CJ h 5.5mm

Parafuso EGM
Incluso

Torque 20Ncm



Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30|h 4.0mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1F cinta 5.5mm
Perfil Ø 3.30|h 6.0mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2F cinta 5.5mm

Perfil Ø4.50|h 4.0mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1F cinta 5.5mm
Perfil Ø4.50|h 6.0mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2F cinta 5.5mm



Ucla Plástica
base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 29A . 1 . CJ - h 0.8mm
EFF 805 . 29A . 2 . CJ - h 1.5mm
EFF 805 . 29A . 3 . CJ - h 2.5mm

Parafuso Incluso 
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 34E
Parafuso EGM 

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 34F
Parafuso 360° 

Torque 34Ncm

Pilar para prótese parafusada



Pilar EGM Reto

Perfil Ø 4.8

EFF 1105 . 29 . 3A . CJ cinta 0.8mm
EFF 1105 . 29 . 3B . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 29 . 3C . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 29 . 3D . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 29 . 3E . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 29 . 3F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Reto

Perfil Ø 4.8

EFF 1105 . 29A . CJ cinta 0.8mm
EFF 1105 . 29B . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 29C . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 29D . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 29E . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 29F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



Micro Pilar EGM

Perfil Ø 3.5

EFF 1105 . 29 . 4A . CJ cinta 0.8mm
EFF 1105 . 29 . 4B . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 29 . 4C . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 29 . 4D . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 29 . 4E . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 29 . 4F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1105 . 29 . 1A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 29 . 1B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 29 . 1C . CJ cinta 3.5mm

EFF 1105 . 29 . 2A . CJ cinta 1.5mm

30° EFF 1105 . 29 . 2B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 29 . 2C . CJ cinta 3.5mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne

EFF 905 . 29A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 29B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 29C . CJ cinta 3.0mm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar PGM/MPGM/MPGT consultar página 24 e 25.



Análogo Digital

EFF 305 . 29 . D



Abut. Rollings*

EFF 1505 . 29A . T
EFF 1505 . 29A . C



Link para CAD/CAM

Large

EFF 6805 . 29A . 1 cinta 0.8mm
EFF 6805 . 29A . 2 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 29A . 3 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 29A . 4 cinta 3.5mm

Small

EFF 6805 . 29A . 1 . S cinta 0.8mm
EFF 6805 . 29A . 2 . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 29A . 3 . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 29A . 4 . S cinta 3.5mm

Parafuso EGM
Incluso

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 29A - h 0.8mm



EFF 2102 . 41E
Parafuso EGM para Zircônia

Torque 20Ncm



Análogo Digital do Munhão Sólido

Perfil Ø 3.30

EFF 305 . 05 . 1A . D h 4mm
EFF 305 . 05 . 1B . D h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 305 . 05 . 2A . D h 4mm
EFF 305 . 05 . 2B . D h 6mm



EFF 2102 . 34E
Parafuso EGM

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 34F
Parafuso 360°

Torque 34Ncm



Scan Intraoral

EFF 9205 . 29A . P . CJ



Scan Intraoral para Munhão Sólido

Perfil Ø 3.30

EFF 9205 . 05 . 1A . P . CJ h 4mm
EFF 9205 . 05 . 1B . P . CJ h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 9205 . 05 . 2A . P . CJ h 4mm
EFF 9205 . 05 . 2B . P . CJ h 6mm



Scan-Body

Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A

Componentes para Prótese Parafusada Pilar EGM



PGM



Capa de Proteção
EFF 119 . 01 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 219 . 01A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 219 . 01B . CJ



Análogo
EFF 319 . 01



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 419 . 01A
Rotacional
EFF 419 . 01B



Coping Plástico Base CrCo
Anti Rotacional
EFF 819 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 819 . 01B . CJ



Análogo Digital
EFF 319 . 01 . D



Scan Intraoral
EFF 9219 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF 6819 . 01A
Rotacional
EFF 6819 . 01B



EFF 2104 . 24E
Parafuso EGM

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 24E
Parafuso EGM

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 33E
Parafuso EGM

Torque 32Ncm

Componentes para Prótese Parafusada Micro Pilar EGM



MPGM



Capa de Proteção
EFF 115 . 01 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 215 . 01A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 215 . 01B . CJ



Análogo
EFF 315 . 01



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 415 . 01A
Rotacional
EFF 415 . 01B



Coping Plástico Base CrCo
Anti Rotacional
EFF 815 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 815 . 01B . CJ



Análogo Digital
EFF 315 . 01 . D



Scan Intraoral
EFF 9215 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF 6815 . 01A
Rotacional
EFF 6815 . 01B



EFF 2101 . 12A
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 12A
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 12A
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



Coping Provisório

Anti Rotacional

EFF 416 . 01A

Rotacional

EFF 416 . 01B



EFF 2104 . 22A 
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



Análogo Digital

EFF 316 . 01 . D



Scan Intraoral

EFF 9216 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CAM


Anti Rotacional

EFF 6816 . 01A


Rotacional

EFF 6816 . 01B



EFF 2104 . 22A 
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm

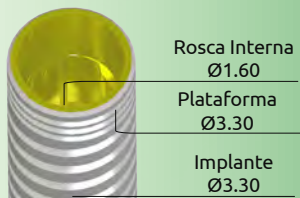

Rosca Interna
Ø1.60

Plataforma
Ø3.30

Implante
Ø3.30

Componentes para Implantes MIS® CC NP C1 - NARROW

S
M
P
Sistema Multi Plataforma
T3.1

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Cicatrizador para C1 Perfil Ø3.3

EFF 105 . 40 . 1A cinta 3.0mm
EFF 105 . 40 . 1B cinta 4.0mm
EFF 105 . 40 . 1C cinta 5.0mm

Perfil Ø4.0

EFF 105 . 40 . 2A cinta 3.0mm
EFF 105 . 40 . 2B cinta 4.0mm
EFF 105 . 40 . 2C cinta 5.0mm



Transfer Moldeira Aberta

EFF 205 . 40A . CJ



Transfer Moldeira Fechada

EFF205 . 40B . CJ



Análogo do Implante

EFF 305 . 40



Munhão Provisório

Anti Rotacional

EFF 405 . 40A . 1 cinta 1.0mm
EFF 405 . 40A . 2 cinta 2.0mm
EFF 405 . 40A . 3 cinta 3.0mm

Rotacional

EFF 405 . 40B . 1 cinta 1.0mm



Munhão Estético

Anti Rotacional

EFF 505 . 40A cinta 1.0mm
EFF 505 . 40B cinta 2.0mm
EFF 505 . 40C cinta 3.0mm

Angulado 10°

EFF 505 . 40A . 1 cinta 1.0mm
EFF 505 . 40B . 1 cinta 2.0mm
EFF 505 . 40C . 1 cinta 3.0mm

Angulado 20°

EFF 505 . 40A . 3 cinta 1.0mm
EFF 505 . 40B . 3 cinta 2.0mm
EFF 505 . 40C . 3 cinta 3.0mm



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional

EFF 805 . 40A . 1 . CJ cinta 1.0mm
EFF 805 . 40A . 2 . CJ cinta 2.0mm

Rotacional

EFF 805 . 40B . 1 . CJ cinta 1.0mm



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm

Pilar para prótese aparafusada



* Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 40A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 40B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1105 . 40C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1105 . 40D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



*Mini Pilar Angulado

EFF 1105 . 40 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 40 . 1B . CJ cinta 2.0mm

EFF 1105 . 40 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 40 . 2B . CJ cinta 2.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.

*Padrão Branemark®.



Análogo Digital

EFF 305 . 40



Abut. Rollings*

EFF 1505 . 40A . C
EFF 1505 . 40A . T



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM

Large/Anti Rotacional

EFF 6805 . 40A . 1 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 40A . 2 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 40A . 3 cinta 3.0mm

Large/Rotacional

EFF 6805 . 40B . 1 cinta 0.5mm

Small/Anti Rotacional

EFF 6805 . 40A . 1S cinta 0.5mm
EFF 6805 . 40A . 2S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 40A . 3S cinta 3.0mm

Small/Rotacional

EFF 6805 . 40B . 1S cinta 0.5mm



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia

EFF 6905 . 40A



EFF 2102 . 54A
Parafuso
para Zircônia

Torque 20Ncm



Scan Intraoral

EFF 9205 . 40A . P . CJ



Scan-Body

Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Cicatrizador para V3
Perfil Ø3.3
EFF 105 . 40 . 1A cinta 3.0mm
EFF 105 . 40 . 1B cinta 4.0mm
EFF 105 . 40 . 1C cinta 5.0mm
Perfil Ø4.0
EFF 105 . 40 . 2A cinta 3.0mm
EFF 105 . 40 . 2B cinta 4.0mm
EFF 105 . 40 . 2C cinta 5.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 41A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF205 . 41B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 41



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 41A . 1 cinta 1.0mm
EFF 405 . 41A . 2 cinta 2.0mm
EFF 405 . 41A . 3 cinta 3.0mm
Rotacional para C1 e V3
EFF 405 . 40B . 1 cinta 1.0mm




Munhão Estético
Anti Rotacional
EFF 505 . 41A cinta 1.0mm
EFF 505 . 41B cinta 2.0mm
EFF 505 . 41C cinta 3.0mm

Angulado 10°
EFF 505 . 41A . 1 cinta 1.0mm
EFF 505 . 41B . 1 cinta 2.0mm
EFF 505 . 41C . 1 cinta 3.0mm
Angulado 20°
EFF 505 . 41A . 3 cinta 1.0mm
EFF 505 . 41B . 3 cinta 2.0mm
EFF 505 . 41C . 3 cinta 3.0mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 41A . 1 . CJ cinta 1.0mm
EFF 805 . 41A . 2 . CJ cinta 2.0mm
Rotacional para C1 e V3
EFF 805 . 40B . 1 . CJ cinta 1.0mm

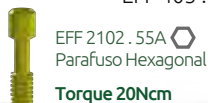

EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Torque 20Ncm

*Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 40A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 40B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1105 . 40C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1105 . 40D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

*Mini Pilar Angulado

17°
EFF 1105 . 41 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 41 . 1B . CJ cinta 2.0mm
30°
EFF 1105 . 41 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 41 . 2B . CJ cinta 2.0mm

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.

*Padrão Branemark®.

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 41



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 41A . C
EFF 1505 . 41A . T



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large/Anti Rotacional
EFF 6805 . 41A . 1 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 41A . 2 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 41A . 3 cinta 3.0mm
Large/Rotacional
EFF 6805 . 40B . 1 cinta 0.5mm



EFF 2102 . 55A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm

Small/Anti Rotacional
EFF 6805 . 41A . 1S cinta 0.5mm
EFF 6805 . 41A . 2S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 41A . 3S cinta 3.0mm
Small/Rotacional
EFF 6805 . 40B . 1S cinta 0.5mm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface
para Zircônia
EFF 6905 . 41A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 41A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 54A
Parafuso
para Zircônia
Torque 20Ncm

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø1.80

Plataforma
Ø3.75/3.90
4.20/4.30

Implante
Ø3.75/3.90
4.20/4.30

Componentes para Implantes MIS® CC SP C1/V3 - STANDARD



T3.3

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Cicatrizador

Perfil Ø3.9

EFF 105 . 42 . 1A cinta 3.0mm
EFF 105 . 42 . 1B cinta 4.0mm
EFF 105 . 42 . 1C cinta 5.0mm

Perfil Ø4.8

EFF 105 . 42 . 2A cinta 2.0mm
EFF 105 . 42 . 2B cinta 3.0mm
EFF 105 . 42 . 2C cinta 4.0mm



Transfer Moldeira Aberta

EFF 205 . 42A . CJ



Transfer Moldeira Fechada

EFF205 . 42B . CJ



Análogo do Implante

EFF 305 . 42



Munhão Provisório

Perfil Ø4.8

Anti Rotacional

EFF 405 . 42A . 1 . 1 cinta 1.0mm
EFF 405 . 42A . 2 . 1 cinta 2.0mm
EFF 405 . 42A . 3 . 1 cinta 3.0mm

Rotacional

EFF 405 . 42B . 1 cinta 1.0mm



Munhão Estético

Perfil Ø4.8

Anti Rotacional

EFF 505 . 42A . 1 cinta 1.0mm
EFF 505 . 42B . 1 cinta 2.0mm
EFF 505 . 42C . 1 cinta 3.0mm

Angulado 15°/Perfil Ø4.8

EFF 505 . 42A . 2 . 1 cinta 1.0mm
EFF 505 . 42B . 2 . 1 cinta 2.0mm
EFF 505 . 42C . 2 . 1 cinta 3.0mm

Angulado 15°/Perfil Ø5.8

EFF 505 . 42A . 2 . 2 cinta 1.0mm
EFF 505 . 42B . 2 . 2 cinta 2.0mm
EFF 505 . 42C . 2 . 2 cinta 3.0mm




Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional

EFF 805 . 42A . 1 . CJ cinta 1.0mm
EFF 805 . 42A . 2 . CJ cinta 2.0mm

Rotacional

EFF 805 . 42B . 1 . CJ cinta 1.0mm

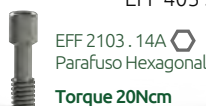

EFF 2103 . 14A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Torque 20Ncm

*Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 42A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 42B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1105 . 42C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1105 . 42D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

*Mini Pilar Angulado 17°

17° EFF 1105 . 42 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 42 . 1B . CJ cinta 2.0mm
30° EFF 1105 . 42 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 42 . 2B . CJ cinta 2.0mm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.

* Padrão Branemark®.



Análogo Digital

EFF 305 . 42



Abut. Rollings*

EFF 1505 . 42A . C
EFF 1505 . 42A . T



EFF 2103 . 14A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM

Large/Anti Rotacional
EFF 6805 . 42A . 1 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 42A . 2 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 42A . 3 cinta 3.0mm
Large/Rotacional
EFF 6805 . 42B . 1 cinta 0.5mm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Scan Intraoral

EFF 9205 . 42A . P . CJ



Scan-Body

Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2103 . 14A
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



Interface para Zircônia

EFF 6905 . 42A



EFF 2103 . 42A
Parafuso
para Zircônia

Torque 20Ncm

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/Ø3.8/Ø4.5/Ø4.5

Rosca Interna

Ø1.60

Plataforma

Ø3.50/3.80
4.50/5.50

Implante

3.00/3.80
4.50/5.50



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador
Perfil Ø4.50

EFF 105 . 10 . 1A cinta 2.0mm
EFF 105 . 10 . 1B cinta 4.0mm
EFF 105 . 10 . 1C cinta 6.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 10A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 10B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 10



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 405 . 10A
Rotacional
EFF 405 . 10B



EFF 2102 . 24A Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão Cimentável
Perfil Ø3.50

EFF 505 . 10A cinta 1.0mm
EFF 505 . 10C cinta 3.0mm



EFF 2102 . 24A Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 805 . 10A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 10B . CJ



EFF 2102 . 24A Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 10A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 10B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1105 . 10C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1105 . 10D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° EFF 1105 . 10 . 1A . CJ cinta 2.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



Análogo Digital
EFF 305 . 10 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 10A . T
EFF 1505 . 10A . C



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6805 . 10A . 1 cinta 1.5mm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



EFF 2102 . 24A Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 24A Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 10A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 10A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2102 . 18A Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 20Ncm



Rosca Interna
Ø1.60

Plataforma
Ø3.50/4.00

Implante
Ø3.50/4.00

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/Ø4.0



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador
EFF 105 . 12



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 12A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 12B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 12



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 12A
Rotacional
EFF 405 . 12B




Munhão Cimentável
EFF 505 . 12A




**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 805 . 12A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 12B . CJ




EFF2102.06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF2102.06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF2102.06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 12A cinta 1.0mm
EFF 1105 . 12B cinta 2.0mm
EFF 1105 . 12C cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária



EsthetiOne
EFF 905 . 12A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 12B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 12C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM




Análogo Digital
EFF 305 . 12 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 12A . T
EFF 1505 . 12A . C




EFF2102.06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6805 . 12A . 1



EFF2102.06A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 12A



EFF 2102 . 35A 
Parafuso Hexagonal para Zirconia
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 12A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.




K3.4

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/Ø4.5/Ø5.5/Ø7.0 Regular C/X

Rosca Interna
Ø1.80

Plataforma
Ø3.50/4.50
5.50/7.00

Implante
Ø3.50/4.50
5.50/7.00

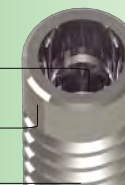

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 27



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 27A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 27B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 27A - Ø3.30
EFF 305 . 27B - Ø4.50



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 27A . 1 cinta 0.8mm
EFF 405 . 27A . 2 cinta 1.5mm
EFF 405 . 27A . 3 cinta 2.5mm

Parafuso Incluso

Torque 20Ncm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 27A . 1 . CJ - h 0.8mm
EFF 805 . 27A . 2 . CJ - h 1.5mm
EFF 805 . 27A . 3 . CJ - h 2.5mm
Rotacional
EFF 805 . 05 . 1B . CJ



Para h.0.8/1.5/2.5mm

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



SRA® Ø3.30
EFF 1105 . 27 . 3A . CJ - cinta 0.8mm
EFF 1105 . 27 . 3B . CJ - cinta 1.5mm
EFF 1105 . 27 . 3C . CJ - cinta 2.5mm
EFF 1105 . 27 . 3D . CJ - cinta 3.5mm

Torque 20Ncm

SRA® Ø4.60
EFF 1105 . 27 . 4A . CJ - cinta 0.8mm
EFF 1105 . 27 . 4B . CJ - cinta 1.5mm
EFF 1105 . 27 . 4C . CJ - cinta 2.5mm
EFF 1105 . 27 . 4D . CJ - cinta 3.5mm



EsthetOne
EFF 905 . 27A . CJ cinta 1.0mm
EFF 905 . 27B . CJ cinta 2.0mm
EFF 905 . 27C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada unitária

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 27A . D
EFF 305 . 27B . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 27A . T
EFF 1505 . 27A . C

Parafuso Incluso

Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6805 . 27A . 1 - cinta 0.8mm
EFF 6805 . 27A . 2 - cinta 1.5mm
EFF 6805 . 27A . 3 - cinta 2.5mm
EFF 6805 . 27A . 4 - cinta 3.5mm

Parafuso Incluso

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 27A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 27A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2103 . 09A
Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 20Ncm

* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

Componentes para Prótese Parafusada Mini Pilar - Plataforma Regular



M.P.



Capa de Proteção
EFF 111 . 01 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 211 . 01A . L . CJ
EFF 211 . 01A . C . CJ




Transfer Moldeira Fechada
EFF 211 . 01B . CJ



Análogo
EFF 311 . 01




Coping Provisório
EFF 411 . 01

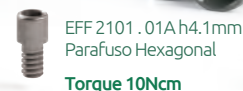

EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm

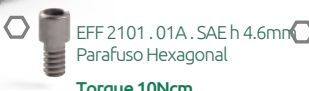

EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



Coping Provisório (Laser)
EFF 411 . 01 . LR



Coping Plástico
EFF 711 . 01



Coping Plástico Base CrCo
EFF 811 . 01 . CJ



Análogo Digital
EFF 311 . 01 . D



Scan Intraoral
EFF 9211 . 01A . P . CJ




Link para CAD/CAM
EFF 6811 . 01



EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm

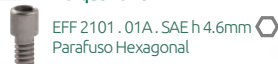


EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm

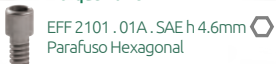


EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm




EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm

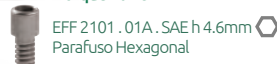


EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm

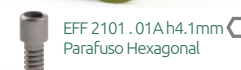

EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm

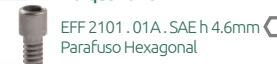

EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm

Componentes para Prótese Parafusada Pilar EsthetiOne



EONE



Capa de Proteção
EFF 118 . 01A . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 218 . 01A . 1 . CJ C/AR
EFF 218 . 01A . CJ S/AR



Transfer Moldeira Aberta
EFF 218 . 01B . 1 . CJ C/AR
EFF 218 . 01B . CJ S/AR



Coping Plástico base CrCo
EFF 818 . 01A . CJ C/AR
EFF 818 . 01B . CJ S/AR



EFF 2104 . 38A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 38F
Parafuso 360°


Torque 32Ncm



Análogo Digital
EFF 318 . 01



Link para CAD/CAM
EFF 6818 . 01A C/AR
EFF 6818 . 01B S/AR

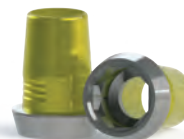

Link para CAD/CAM Large
EFF 6818 . 01A . 1



Scan Intraoral
EFF 9218 . 01A . P . CJ



EFF 2104 . 38A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 38F
Parafuso 360°

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 38A
Parafuso Hexagonal

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 38F
Parafuso 360°

Torque 32Ncm

Componentes para Prótese Parafusada One Base



Capa de Proteção
EFF 123 . 01A . CJ cinta 1.5mm
EFF 123 . 01B . CJ cinta 2.5mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 223 . 01A . 1 . CJ C/AR
EFF 223 . 01A . CJ S/AR



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 223 . 01B . 1 . CJ C/AR
EFF 223 . 01B . CJ S/AR



Munhão Provisório
EFF 423 . 01A C/AR
EFF 423 . 01B S/AR



**Coping Plástico
base CrCo**
EFF 823 . 01A . CJ C/AR
EFF 823 . 01B . CJ S/AR



EFF 2102 . 30A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 30F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 30A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 30F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



**Análogo
Digital**
EFF 323 . 01



Link para CAD/CAM
EFF 6823 . 01A . 1 C/AR
EFF 6823 . 01B . 1 S/AR



Scan Intraoral
EFF 9223 . 01A . P . CJ



EFF 2102 . 30A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm














EFF 2102 . 30F
Parafuso 360°
Torque 20Ncm



Chaves Digitais

Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	---------	-------	--	--	-----	------------------













CURTA

 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm
EFF 7001 . A	EFF 7006 . A	EFF 7002 . A	EFF 7003 . A	EFF 7004 . A	EFF 7005 . A	EFF 7007 . A	EFF 7008 . A	EFF 7009 . A	EFF 7010 . A	EFF 7021 . A	EFF 7022 . A




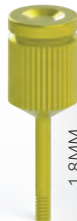


MÉDIA

 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm
EFF 7001 . B	EFF 7006 . B	EFF 7002 . B	EFF 7003 . B	EFF 7004 . B	EFF 7005 . B	EFF 7007 . B	EFF 7008 . B	EFF 7009 . B	EFF 7010 . B	EFF 7021 . B	EFF 7022 . B

LONGA




 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm
EFF 7001 . C	EFF 7006 . C	EFF 7002 . C	EFF 7003 . C	EFF 7004 . C	EFF 7005 . C	EFF 7007 . C	EFF 7008 . C	EFF 7009 . C	EFF 7010 . C	EFF 7021 . C	EFF 7022 . C

ANÁLOGO DIGITAL

 1.4MM 29.20mm	 1.6MM 29.20mm	 1.7MM 29.20mm	 1.8MM 29.20mm	 2.0MM 29.20mm	 2.5MM 29.20mm
EFF 7016 . A	EFF 7016 . B	EFF 7016 . C	EFF 7016 . D	EFF 7016 . E	EFF 7016 . F



Chaves do Torquímetro

Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
CURTA											
 17.50mm EFF 7101 . A	 17.50mm EFF 7106 . A	 17.50mm EFF 7102 . A	 17.50mm EFF 7103 . A	 17.50mm EFF 7104 . A	 17.50mm EFF 7105 . A	 17.50mm EFF 7107 . A	 17.50mm EFF 7108 . A	 17.50mm EFF 7109 . A	 17.50mm EFF 7110 . A	 17.50mm EFF 7121 . A	 17.50mm EFF 7122 . A
MÉDIA											
 23.00mm EFF 7101 . B	 23.00mm EFF 7106 . B	 23.00mm EFF 7102 . B	 23.00mm EFF 7103 . B	 23.00mm EFF 7104 . B	 23.00mm EFF 7105 . B	 23.00mm EFF 7107 . B	 23.00mm EFF 7108 . B	 23.00mm EFF 7109 . B	 23.00mm EFF 7110 . B	 23.00mm EFF 7121 . B	 23.00mm EFF 7122 . B
LONGA											
 29.20mm EFF 7101 . C	 29.20mm EFF 7106 . C	 29.20mm EFF 7102 . C	 29.20mm EFF 7103 . C	 29.20mm EFF 7104 . C	 29.20mm EFF 7105 . C	 29.20mm EFF 7107 . C	 29.20mm EFF 7108 . C			 29.20mm EFF 7121 . C	 29.20mm EFF 7122 . C

TORQUÍMETRO



EFF 7600 . CJ




EFF 000453

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

Kits Protéticos All in One|All in One Full|Easy

EFF00455 – Kit Protético ALL IN ONE FULL

- EFF7101.A – Chave para Torquímetro Cover-screw curta
- EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta
- EFF7103.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.30mm curta
- EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta
- EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta
- EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip curta
- EFF7108.A – Chave para Torquímetro Fenda curta
- EFF7109.A – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment curta
- EFF7121.A – Chave para Torquímetro EGM curta
- EFF7122.A – Chave para Torquímetro Dinâmico 360• curta
- EFF7101.B – Chave para Torquímetro Cover-screw média
- EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média
- EFF7103.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.30mm média
- EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média
- EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média
- EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip média
- EFF7108.B – Chave para Torquímetro Fenda média
- EFF7109.B – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment média
- EFF7121.B – Chave para Torquímetro EGM média
- EFF7122.B – Chave para Torquímetro Dinâmico 360• média
- EFF7600.CJ - Adaptador
- EFF000453 – Torquímetro

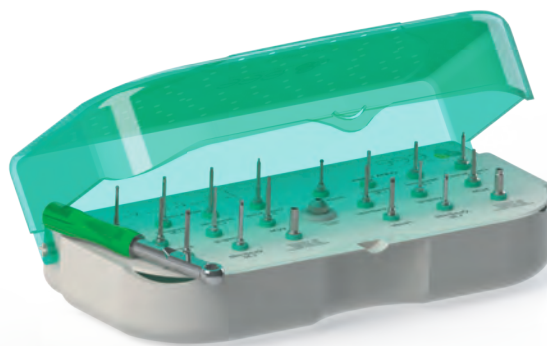


EFF00456 – Kit Protético EASY

- EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média
- EFF7103.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.30mm curta
- EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média
- EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média
- EFF7109.B – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment média
- EFF7121.B – Chave para Torquímetro EGM média
- EFF7600.CJ - Adaptador

EFF00455.1 – Kit Protético ALL IN ONE

- EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta
- EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta
- EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta
- EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip curta
- EFF7109.A – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment curta
- EFF7121.A – Chave para Torquímetro EGM curta
- EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média
- EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média
- EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média
- EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip média
- EFF7109.B – Chave para Torquímetro Estheticone e Mini Abutment média
- EFF7121.B – Chave para Torquímetro EGM média
- EFF7600.CJ - Adaptador
- EFF000453 – Torquímetro

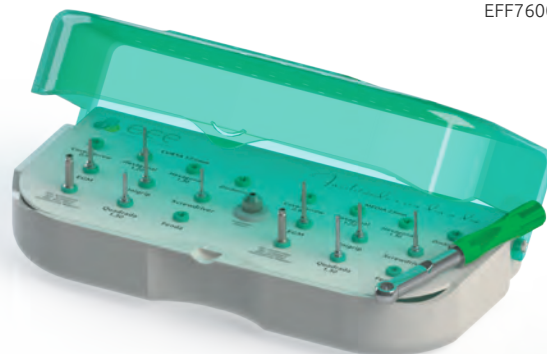

Kits Scan Intaroal

EFF00459 – Kit Scan Intraoral

*confira kit completo com 18 Scan Intraorais a escolher.



Etiqueta

Registro/Register/Grabar ANVISA:

Código do Produto (REF) **Sistema Multi Plataforma**

Contêm/Contains/Contiene:

Matéria-prima/feedstock/Materia prima:

Responsável Técnico/Technical Manager/Responsable Técnico: Dr. Flavio Rosa de Oliveira | CRO-SP 90026

Fabricante: EFF DENTAL COMPONENTES LTDA. RUA/STREET/CALE: CAIO GRACO, 105/109 | VL. ROMANA | CEP: 05044-000 SÃO PAULO - SP - BRASIL | CNPJ: 14.776.044/0001-12 I.E.: 146.829.212.110 | Indústria Brasileira ☎ +55 11 3059.2200

Representante Técnico Representante Europeu: Obelis SA Boulevard Général Wahit 53, 1030 Brussels, BELGIUM ✉ mail@obelis.net ☎ +32 2.732.59.54

Ícones: Registro ANVISA, Lote (LOT), Produto Não Estéril, Data de Fabricação, Data de Validade, Atenção! Consultar instrução, Não Reutilizar, Não Estocar, Mantenha ao Abrigo do Sol, Conserve Seco, Consultar Instruções de Uso (efftecklink.com.br, qualidade@effdental.com.br)

Identificação: Número ANVISA, Lote do Produto

Modelo: EZ - 7.3.01 R01 - 22/01/2021

Registro/Register/Grabar ANVISA:

Código do Produto (REF) **Sistema Multi Plataforma**

Contêm/Contains/Contiene:

Matéria-prima/feedstock/Materia prima:

Responsável Técnico/Technical Manager/Responsable Técnico: Dr. Flavio Rosa de Oliveira | CRO-SP 90026

Fabricante: EFF DENTAL COMPONENTES LTDA. RUA/STREET/CALE: CAIO GRACO, 105/109 | VL. ROMANA | CEP: 05044-000 SÃO PAULO - SP - BRASIL | CNPJ: 14.776.044/0001-12 I.E.: 146.829.212.110 | Indústria Brasileira ☎ +55 11 3059.2200

Representante Técnico Representante Europeu: Obelis SA Boulevard Général Wahit 53, 1030 Brussels, BELGIUM ✉ mail@obelis.net ☎ +32 2.732.59.54

Ícones: Registro ANVISA, Lote (LOT), Produto Estéril, Data de Fabricação, Data de Validade, Atenção! Consultar instrução, Não Reutilizar, Não Estocar, Mantenha ao Abrigo do Sol, Conserve Seco, Consultar Instruções de Uso (effdental.com.br/bulas, qualidade@effdental.com.br)

Identificação: Número ANVISA, Lote do Produto

Modelo: E1 - 7.3.01 R11 - 22/01/2021

Informações Adicionais:

- * Observe sempre o torque máximo para cada parafuso.
- * Consulte o site da EFF Dental e saiba mais sobre a política de troca e devolução de produtos: <https://effdental.com.br/troca-e-devolucao>.
- * Consulte os vendedores e distribuidores da EFF Dental e saiba mais sobre a política de preços e parcelamento dos produtos.



www.efdental.com.br

EFF DENTAL_CATALOGO DE PRODUTOS CM_R13 DATA 01/11/2021

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

☎ 11 3059.2200 | @ atendimento@efdental.com.br | 🌐 www.efdental.com.br

📘 facebook.com/efdental | 📷 instagram.com/efdental